



Hillrom™



PST 500
Precision Surgical Table

AU BLOC, LES TABLES D'OPÉRATION SONT PRIMORDIALES POUR LES SOINS.

Elles sont le moyen permettant aux chirurgiens de mener les patients vers la récupération. Elles sont utilisées par les infirmiers, les techniciens et les spécialistes pour le bon déroulement des interventions. Elles accueillent et supportent les patients pendant un moment critique de leur vie.

Au centre de cette activité globale, les enjeux sont très élevés, tout comme les standards que vous mettez en œuvre.

VOICI LA NOUVELLE TABLE D'OPÉRATION HILLROM PST 500.

Cette table polyvalente et facile à utiliser prend en charge le nombre et la variété des interventions quotidiennes. Elle vous aide à accueillir vos patients et à rationaliser vos tâches.


Parce que la table d'opération idéale n'est pas simplement une table ; c'est la fondation sur laquelle reposent tous les soins. Posséder une fondation solide permet d'ouvrir le champ des possibles.





POLYVALENTE

De nombreuses possibilités de positionnement pour diverses applications chirurgicales – optimisez votre investissement et développez vos capacités d'intervention.

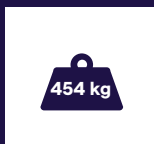

SÛRE

Avec sa capacité pouvant aller jusqu'à 454 kg de charge, la prévention des collisions, le système de verrouillage au sol avec mise à niveau automatique, et d'autres fonctionnalités, la table PST 500 a été conçue en intégrant la sécurité du patient et de l'utilisateur.*



EFFICACE

Une conception modulaire, des manipulations ergonomiques, l'imagerie à 360° et le système de messages lumineux vous aideront à optimiser vos flux et à prendre en charge plus de patients, plus rapidement.†



INTUITIVE

La table est rapide à configurer et facile à utiliser grâce aux composants légers, au système d'accroche à alignement automatique « Hook » et à la télécommande intuitive.

*La charge maximale peut varier en fonction de la configuration de la table.
Consultez le mode d'emploi pour en savoir plus.

†Imagerie à 360° possible avec les composants spécifiques en fibres de carbone.



CHIRURGIE GÉNÉRALE

**UNE BASE SOLIDE.
PLUSIEURS POSITIONS.**

La table PST 500 est flexible et s'adapte aux diverses pratiques chirurgicales que vous mettez en œuvre au quotidien. Configurez simplement la table et les accessoires de sorte à obtenir le meilleur environnement en fonction de l'intervention.

BARIATRIE

Plaques jambières indépendantes écartables pour les Sleeve





VASCULAIRE

Extension Carbon facilitant
le passage des arceaux



THYROÏDE

Décubitus dorsal avec
maintien de la nuque



UROLOGIE/THORACIQUE

Position latérale pour la néphrectomie
ou la chirurgie thoracique



GYNÉCOLOGIE/UROLOGIE

Position de lithotomie




OPHTALMOLOGIE/ORL

Décubitus dorsal avec système de
tête pour l'ophtalmologie et la
chirurgie ORL

ORTHOPÉDIE

La table PST 500 peut aussi bien être utilisée pour les interventions de chirurgie générale que pour l'orthopédie.

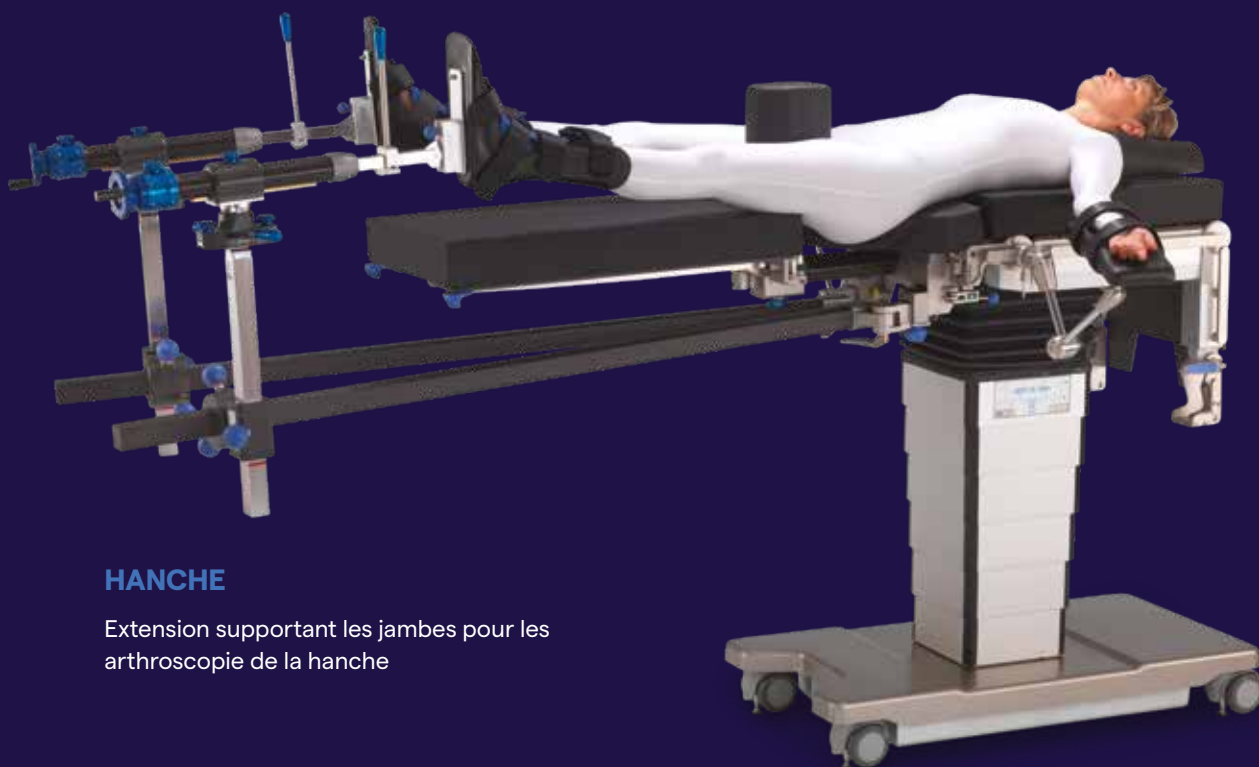

HANCHE

Extension supportant les jambes pour les arthroscopie de la hanche



ÉPAULE

Position « beach chair » pour les arthroscopies et les chirurgies ouvertes de l'épaule



MEMBRE SUPÉRIEUR

Système de traction permettant la fixation et le soutien des membres supérieurs



FÉMUR ET HANCHE

Prothèses de hanche mini-invasives (MIS)



GENOU

Accès libre pour l'arthroscopie

RACHIS ET NEUROCHIRURGIE

Oubliez les tables non adaptées. La table PST 500 peut être facilement configurée pour les interventions du rachis et de neurochirurgie grâce à sa modularité et à ses accessoires.



RACHIS

Chirurgie rachidienne avec passage aisé des arceaux

360°

Imagerie simplifiée*

Le plateau radiotransparent et les composants en fibres de carbone facilitent les acquisitions à 360°. En outre, vous pouvez positionner l'arceau où vous en avez besoin grâce à l'importante translation longitudinale.



*imagerie à 360° possible avec les composants spécifiques en fibres de carbone.



NEUROCHIRURGIE

Position assise pour les chirurgies crâniennes postérieures



NEUROCHIRURGIE À 360°

Positionnement flexible de la tête grâce à l'adaptateur articulé de neurochirurgie 3D

CONCEPTION INTUITIVE

Nous avons conçu la table PST 500 pour être facile à utiliser, afin que l'équipe chirurgicale puisse se concentrer sur ce qui compte, le patient.

Configuration rapide

Une configuration facile et rapide grâce aux composants légers et au système d'accroche « Hook ».

Surfaces lisses

Elles facilitent le nettoyage.

Plateau polyvalent

Ses larges capacités d'articulation permettent d'obtenir à coup sûr la bonne position.



Système innovant de messages lumineux

Le système lumineux donne des informations sur l'état de la table comme la mise en place des freins, le niveau de batterie, les codes d'erreur ce qui facilite le quotidien du personnel.



*imagerie à 360° possible avec les composants spécifiques en fibres de carbone.

†La charge maximale peut varier en fonction de la configuration de la table. Consultez le mode d'emploi pour en savoir plus.

‡La table doit être principalement utilisée avec une télécommande
Télécommande vendue séparément

Imagerie

Le plateau coulissant sur près de 40 cm facilite le passage des arceaux et les composants en fibres de carbone permettent les acquisitions à 360°.*

Prévention des collisions

Les collisions sont évitées, ainsi que les risques qui en découlent.

Conception intuitive

Tous les éléments fonctionnels obéissent à un code couleur qui permet un accès rapide et garantit une utilisation conviviale.

Capacité de charge élevée


Avec une capacité allant jusqu'à 454 kg, la table peut accueillir un grand nombre de patients.†

Facile à déplacer

Les doubles roues directionnelles et la 5ème roue incluse vous permettent de manœuvrer et déplacer la table très facilement.

Télécommande intuitive filaire ou sans fil^s

Boutons rétro-éclairés pour un meilleur accès en toutes circonstances. Modèle filaire ou sans fil. Clavier identique sur le pilier pour plus de simplicité.

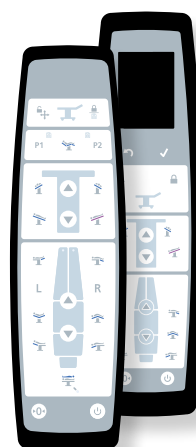


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La table PST 500 bénéficie de l'expertise chirurgicale de Hillrom et présente une ingénierie de pointe à un prix qui ne dépassera pas votre budget. Elle est conçue pour les blocs d'aujourd'hui – y compris le vôtre.

PST 500 Precision Surgical Table	
Dimensions du plateau opératoire	107 cm L x 60 cm l
Poids net de la table	250 kg
Ajustement de la hauteur	59,8 cm - 114,8 cm \pm 0,5 cm
Déclive / Proclive	\pm 35° (\pm 2°)
Inclinaison latérale	\pm 25° (\pm 2°)
Translation longitudinale	40 cm \pm 0,5 cm Côté tête : 20 cm / Côté pieds : 20 cm
Ajustement du plateau dorsal	\pm 90° (\pm 2°)
Ajustement des jambières	+ 90° / - 105°
Position zéro	Mise à niveau simultanée de toutes les sections
Charge admissible maximale	454 kg*



*La charge maximale peut varier en fonction de la configuration de la table. Consultez le mode d'emploi pour en savoir plus.

RÉGLAGE EN HAUTEUR

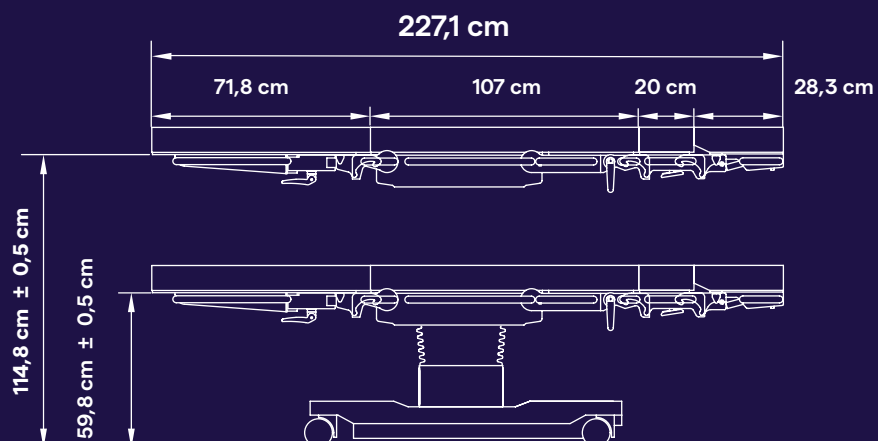


DÉCLIVE / PROCLIVE


INCLINAISON LATÉRALE

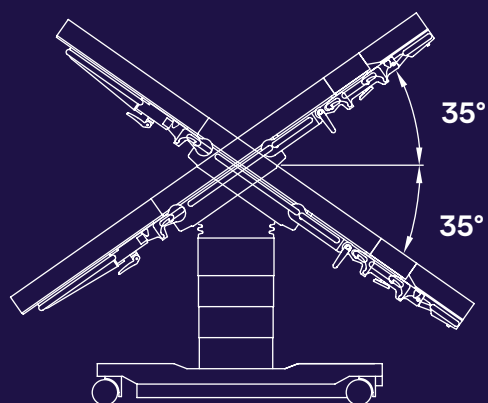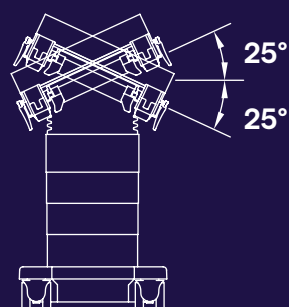


AJUSTEMENT DES JAMBIÈRES

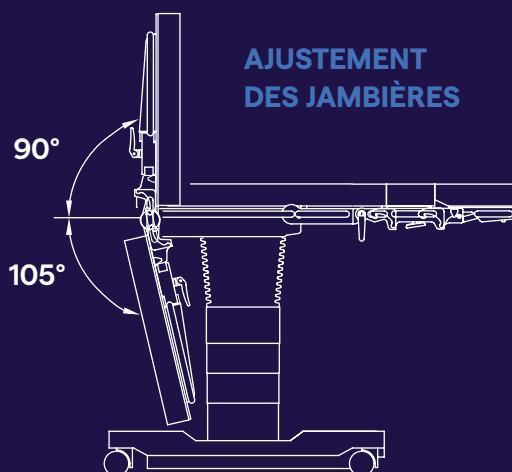

AJUSTEMENT DU PLATEAU DORSAL

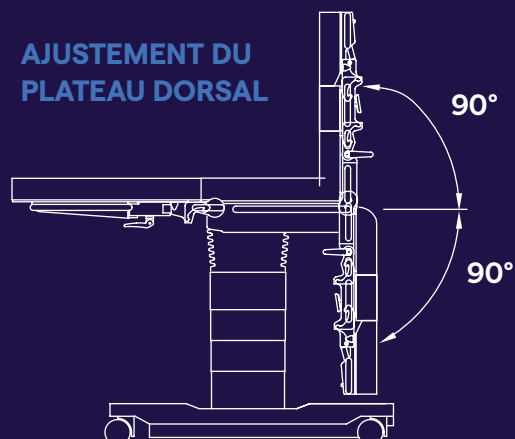

TRANSLATION LONGITUDINALE

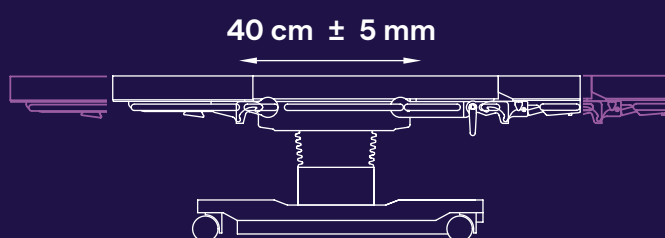


UNE MAINTENANCE ASSURÉE PAR DES EXPERTS. PRÊTS QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN.

La table PST 500 vous permet d'identifier les problèmes potentiels et de maximiser la disponibilité de l'équipement

- Base, colonne et plateau faciles d'accès
- Système d'affichage intuitif de diagnostic intégré
- La télécommande affiche automatiquement les rappels de maintenance
- Le système de messages lumineux indique quand le service est requis



La fondation que vos patients et vous méritez

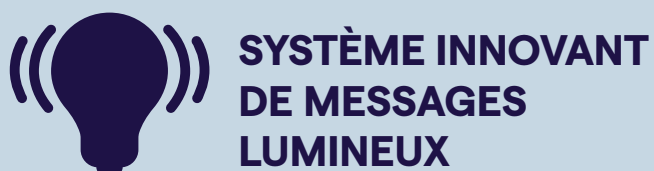

Rails standard compatibles avec des

 **accessoires**
tiers

*La charge maximale peut varier en fonction de la configuration de la table. Consultez le mode d'emploi pour en savoir plus.

†imagerie à 360° possible avec les composants spécifiques en fibres de carbone.



Hillrom™

À PROPOS DE HILLROM

Hillrom est un leader mondial des technologies médicales dont les 10 000 employés poursuivent un même objectif : améliorer les résultats pour les patients et les prestataires de soins en faisant progresser les soins connectés. Nos innovations touchent plus de 7 millions de patients dans le monde chaque jour. Elles visent à permettre un diagnostic et un traitement précoces, à optimiser l'efficacité chirurgicale et à accélérer la récupération des patients, mais aussi à simplifier la communication clinique et à rapprocher les soins des gens. Ces résultats sont possibles grâce à des lits intelligents connectés, des lève-malades, des technologies d'évaluation et de surveillance des patients, des outils de collaboration pour les soignants, des appareils de soins respiratoires, du matériel avancé pour le bloc opératoire, etc., qui envoient des données exploitables en temps réel aux lieux de soins. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hillrom.com.

Les meilleurs soins chirurgicaux commencent avec une fondation solide basée sur la sécurité et le soutien. Vous trouverez d'avantage d'informations sur la table PST 500 à la page hillrom.com.

130 E. Randolph St. Suite 1000, Chicago, IL 60601

Le produit PST 500 est destiné à être utilisé par les cliniciens et le personnel médical qualifié. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à cette réglementation, porte le marquage CE. Hill-Rom vous recommande de lire attentivement les instructions détaillées pour une utilisation sûre et appropriée incluses dans les documents accompagnant les dispositifs médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable de la bonne utilisation et de l'entretien de ces dispositifs médicaux. Hill-Rom se réserve le droit de modifier sans préavis la conception, les spécifications et les modèles. La seule garantie offerte par Hill-Rom est la garantie écrite expresse étendue à la vente ou à la location de ses produits. TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG est une filiale de Hill-Rom Holdings, Inc.