

Baxter

PST 300 PRECISION SURGICAL TABLE



POUR EN FAIRE PLUS POUR VOS PATIENTS, **DEMANDEZ-EN PLUS À VOTRE ÉQUIPEMENT.**

Vous savez que votre équipe chirurgicale s'engage à aider chaque patient. Cependant, s'appuyer sur des équipements vieillissants ou mal adaptés pour des procédures complexes peut compromettre l'efficacité voire la sécurité du patient dans le pire des cas.

Imaginez si votre équipement vous permettait d'en faire plus, en toute sécurité et efficacement.

VOICI LA TABLE **PST 300** PRECISION SURGICAL TABLE DE BAXTER.

Cette table a été conçue dans une optique de polyvalence et de facilité d'utilisation pour optimiser les tâches et permettre aux soignants de passer moins de temps à gérer des équipements complexes.

La table **PST 300** peut vous aider à vous concentrer sur le plus important.

CONÇUE POUR :



L'ACCESSIBILITÉ

La table est facile à utiliser. Elle est constituée de composants légers et dispose d'un système d'accroche à crochet à alignement automatique.



L'EFFICACITÉ

La conception modulaire et la manipulation élégante vous aident à rationaliser votre flux de travail et à vous concentrer sur les soins aux patients.



LA POLYVALENCE

Une table prend en charge un éventail de positions dans diverses applications chirurgicales, ce qui permet une large gamme d'offres chirurgicales.



CHIRURGIE GÉNÉRALE

PRENEZ EN CHARGE DAVANTAGE DE PATIENTS GRÂCE À PLUS DE POSITIONS.

La table **PST 300** est une table d'opération mobile et configurable pouvant prendre en charge les diverses applications chirurgicales que vous effectuez au quotidien. Du positionnement des patients pendant la procédure chirurgicale à l'administration d'un anesthésique, il vous suffit de choisir la configuration et les accessoires adaptés pour fournir une surface pour chaque procédure.


SOINS BARIATRIQUES

Jambes séparées pour une intervention laparoscopique



CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

Position en décubitus dorsal pour les procédures cardiovasculaires, avec accès pour l'arc

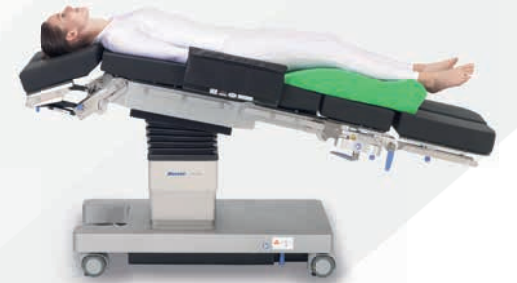

THYROÏDE

Position en décubitus dorsal pour la chirurgie de la thyroïde



NEPHRECTOMIE

Position latérale pour la chirurgie rénale et thoracique



GYNÉCOLOGIE ET UROLOGIE

Position de lithotomie pour la chirurgie gynécologique ou urologique



OPHTALMOLOGIE/ORL

Position en décubitus dorsal avec système de repose-tête pour la chirurgie ophtalmologique et ORL

ORTHOPÉDIE

Avec la table **PST 300**, la table utilisée pour la chirurgie générale peut également prendre en charge de nombreuses procédures orthopédiques.



FEMUR

Positionnement flexible de la jambe pour l'arthroplastie mini-invasive de la hanche



ÉPAULE

Position assis type « beach chair » pour la chirurgie arthroscopique de l'épaule



GENOU

Décubitus dorsal avec accès libre pour l'arthroscopie



MAIN

Position en décubitus dorsal avec fixation de table flexible et radiotransparence à 360° pour la chirurgie de la main



JAMBE


Unité d'extension avec kit de fracture pour pose de clou tibial et fractures du tibia

RACHIS ET NEUROCHIRURGIE

La table **PST 300** convient aux procédures rachidiennes et neurologiques grâce à ses configurations et accessoires flexibles.

IMAGERIE SIMPLIFIÉE

Le plateau radiotransparent et les composants en fibre de carbone de la table simplifient l'imagerie, en particulier pour les radiographies antérieures et postérieures. De plus, vous pouvez positionner un arceau à l'emplacement souhaité grâce à la translation longitudinale pratique.

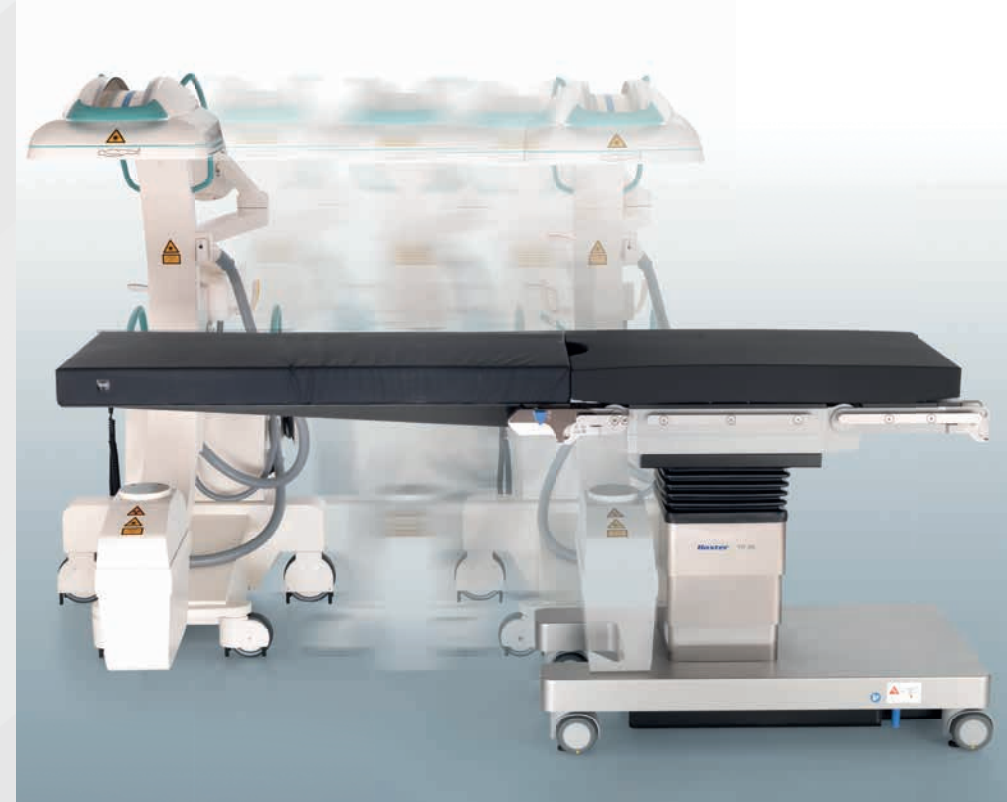

RACHIS

Composants de la table radiotransparents pour la chirurgie du rachis



NEUROLOGIE

Clamp crânien compatible avec l'imagerie 3D pour la neurochirurgie



NEUROCHIRURGIE

Position assise avec clamp crânien pour faciliter les procédures chirurgicales dans la partie postérieure du crâne

CONCEPTION INTUITIVE

Nous avons conçu la table **PST 300** dans une optique de facilité d'utilisation pour aider votre équipe chirurgicale à se concentrer sur ce qui compte : le patient face à eux.

CONCEPTION INTUITIVE

Tous les éléments de commande ont un code de couleur pour un accès rapide.

INSTALLATION RAPIDE

La table est constituée de composants légers et dispose d'un système d'accroche à crochet à alignement automatique pour une installation et des ajustements rapides.

FACILE À DÉPLACER

Les roulettes jumelées permettent de déplacer la table à 360° pour la placer là où vous en avez besoin.

FONCTIONS MOTORISÉES

Les fonctions motorisées de translation longitudinale et d'inclinaison minimisent la manipulation de charges lourdes de votre flux de travail.

TRANSLATION LONGITUDINALE POUR UN ACCÈS FLEXIBLE DE L'ARCEAU

La translation longitudinale motorisée permet un accès facile pour l'imagerie.

CONSTRUCTION ÉTROITE

L'accès au patient est facilité par un espace libre pour les pieds sous le piètement et l'accessibilité de l'arceau.

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE OU SANS FIL INTUITIVE

La télécommande rétro-éclairée est facile à utiliser dans les environnements à faible luminosité. Ses icônes, couleurs et symboles correspondent à ceux de la colonne pour plus de simplicité et d'efficacité.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La table **PST 300** s'adapte aux environnements chirurgicaux réels, y compris les vôtres.


Table d'opération de précision **PST 300**

Poids maximal du patient	400 kg (882 lb)
Poids net de la table	230 kg ±20 kg
Dimensions du plateau de table (L x l)	<p>PST 300 L : 2 177 mm x 601 mm Configuration : articulation simple en H pour la section tête et chacune des jambes.</p> <p>PST 300 S : 2 236 mm x 601 mm Configuration : articulation simple en H pour la section tête, pour la section haut du dos et pour chacune des jambes.</p> <p>601 mm est la largeur de la table avec un rail latéral de type UE. Remarque : la largeur de la table varie selon les rails latéraux présents.</p>
Réglage de la hauteur	660 à 1 030 mm (±10 mm) [26 à 40,6 po (±0,4 po)]
Position zéro	Mise à niveau motorisée de toutes les sections


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

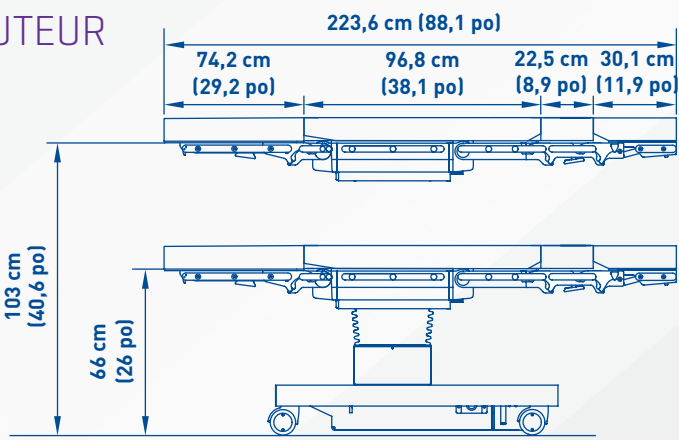


POSITION DE TRENDLENBURG OU DE TRENDLENBURG INVERSÉE

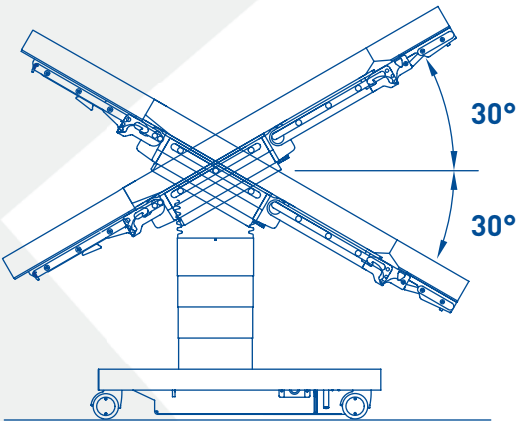


INCLINAISON

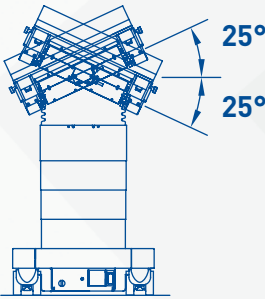


RÉGLAGE DES JAMBIÈRES

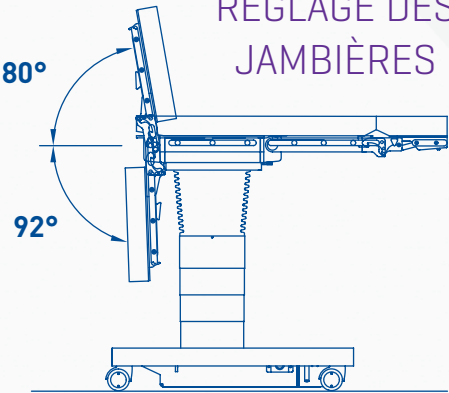

RÉGLAGE DE LA SECTION DOS

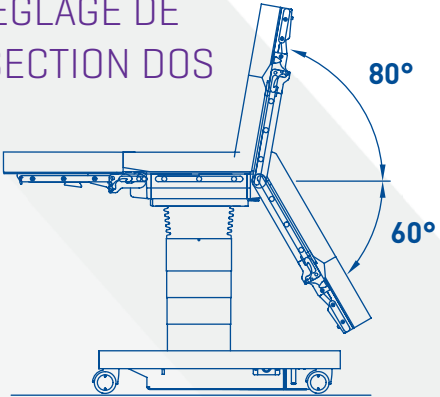

TRANSLATION LONGITUDINALE

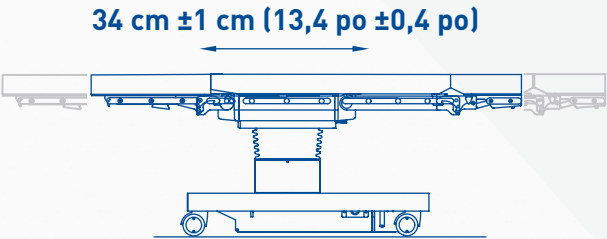

MAINTENANCE EXPERTE. DISPONIBLE QUAND VOUS L'ÊTES.

S'appuyant sur la solide tradition chirurgicale de Baxter, la table **PST 300** est dotée d'une ingénierie de haute qualité.

- Conçue pour faciliter l'installation
- La colonne et le piètement sont accessibles lorsqu'un entretien est nécessaire
- La roulette jumelée facilite le déplacement, le réglage et la fixation de la table, même sur sol irrégulier

Et lorsque vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, vous pouvez compter sur l'équipe de service haut de gamme de Baxter pour bénéficier d'une assistance experte et de temps de réponse rapides.




LA TABLE **PST 300** EN FAIT PLUS POUR VOUS PERMETTRE D'EN FAIRE PLUS.



400 kg
(882 lb)



Accès à l'imagerie
simplifié

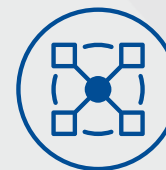

Diverses applications
chirurgicales et un
éventail de positions



Plus de 50 accessoires
compatibles

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE
REPRÉSENTANT BAXTER LOCAL.

Attention : certains produits/options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre représentant Baxter local.

Le système PST 300 est destiné à être utilisé par des médecins et du personnel médical qualifié. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Baxter recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils qui se trouvent dans les documents accompagnant les dispositifs médicaux. Baxter se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Baxter est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

Baxter se conforme à la réglementation applicable en matière de données personnelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique mondiale de confidentialité sur <https://www.baxter.fr/fr/policies-positions/global-privacy-policy>.



Hillrom.Baxter.eu

Baxter et PST 300 sont des marques commerciales de Baxter International Inc. ou de ses filiales.

FR-CS77-250001 [v2.0] 08/2025