

Design simple et épuré

La **table de chirurgie ambulatoire S** est conçue pour vous offrir un soutien maximal pendant les procédures de chirurgie ambulatoire. Elle permet au chirurgien et à son équipe **d'accéder** au patient le plus **facilement** possible. Le plateau a une **largeur de 65 cm** et comporte une section de tête étroite qui comprend une cavité faciale et une prise faisant partie de l'équipement standard. Le **rembourrage de 8 cm** d'épaisseur est recouvert de **cuir synthétique antistatique noir**. Le rembourrage est **scellé** sur la face inférieure avec des coutures soudées et scellées, qui empêchent la pénétration de liquides à l'intérieur. Cela rend le nettoyage et le respect des normes d'hygiène encore plus faciles.

Fiable

La table à **quatre sections**, dotée d'une **charge maximale d'utilisation** enviable **de 250 kg** et d'une construction robuste, est l'appareil le plus fiable finalement. Le logiciel intégré empêche la table de toucher le sol lorsque vous ajustez sa hauteur. En position la plus basse, la table s'arrête juste au-dessus du niveau du sol. La table de chirurgie ambulatoire est équipée d'une **batterie de secours supplémentaire**, de sorte qu'en cas de panne de courant, vous pouvez toujours réinitialiser la position de la table et terminer vos tâches

Flexible

La table électrique possède une **commande circulaire** pour le réglage de la hauteur. Cela est crucial pendant les procédures, car le chirurgien peut **régler la hauteur** quel que soit l'endroit où il se trouve et les **mains libres**. Les deux sections centrales de la table sont électriques, ce qui facilite le positionnement de vos patients. La **commande manuelle** est simple à utiliser et comporte une **fonction mémoire innovante**. Vous pouvez enregistrer deux positions de votre choix en plus d'une position complètement à plat. Les parties de la tête et des jambes sont soutenues par des vérins à gaz et se règlent manuellement. La table est équipée, en version standard, **de rails de fixation** et **d'accoudoirs** facilement réglables.



  Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.
Pod kostanji 7
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117

www.novak-m.com



Chirurgie ambulatoire




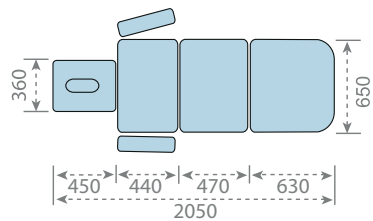


TABLE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE S

Modèle: **ETSOP-65**

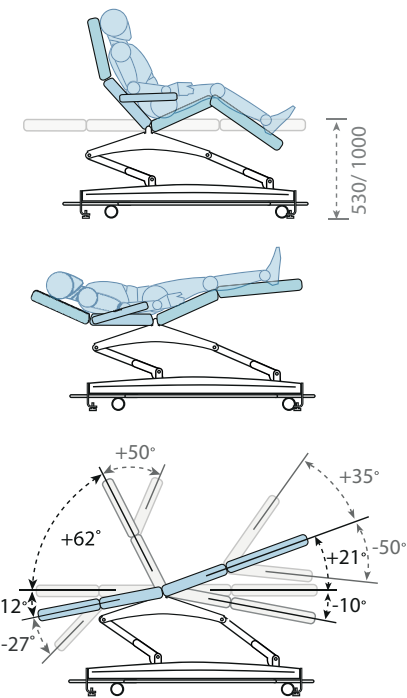

POSITIONS

Appui-tête étroit

- avec cavité et bouchon
- réglable manuellement

Accoudoirs

- sur rail
- hauteur et inclinaison réglables

Rembourrage antistatique noire

- 65 cm de large
- 8 cm d'épaisseur avec mousse à mémoire de forme
- sans couture et entièrement scellé
- surface de couchage plus large grâce au rembourrage fini à angle droit

Batterie de sécurité

- intégrée pour le cas de panne de courant

Système rétractable souple

- roulettes antistatiques
- comprenant un amortisseur pour adoucir l'activation des roulettes

Commande circulaire

- opération simple de haut en bas de tous les côtés de la table

Base de la table

- couvercle en plastique ABS sans vis pour un nettoyage plus facile
- stabilité accrue grâce à charge maximale d'utilisation standard de 250 kg

Commande manuelle

- pour le réglage électrique de la hauteur, du dossier et de l'assise
- une fonction de mémoire innovante

Equipements et accessoires

| | ETSOP-65 |
|---|----------|
| charge maximale d'utilisation 250 kg | ● |
| réglage électrique de la hauteur de la table avec la commande circulaire | ● |
| rembourrage antistatique et scellé sans couture avec mousse à mémoire de forme (8 cm) | ● |
| commande manuelle pour le réglage électrique de la hauteur, du dossier et de l'assise | ● |
| batterie de sécurité intégrée | ● |
| accoudoirs réglables sur rail | ● |
| rail sur le dossier et l'assise (paire) | ● |
| roulettes antistatiques escamotables avec déverrouillage en douceur (Ø 75 mm) | ● |
| porte-rouleau de papier fixé à la base de la table – NZP2-S | ○ |
| connecteur électrique pour équilibrage de tension – PPEQ | ○ |
| interrupteur de sécurité – EVV-S | ○ |

standard ● optionnel ○